

Menge

EURO

ATEMTRAINER

 **mcgro**

TRI-BALL® genießt bei Patienten eine hohe Akzeptanz, es entlastet das Pflegepersonal

MEG 690490

TRI-Ball

1 Stück

3,95 /St.

Atemvolumentrainer mit Flowkontrolle, Flow: 0,6 - 0,9 l/sek.; hilft dem Patienten, durch langsames tiefes Einatmen im TRI-BALL® zwei Kugeln anzuheben, die dritte Kugel soll einen zu hohen Inspirationsflow vermeiden; der Patient soll bei der Atemtherapie die Kugeln in der ersten und zweiten Kammer in der Schwebelage halten; die dritte Kugel sollte nicht angehoben werden; TRI-BALL® ist zum Einpatientengebrauch bestimmt, ein auf der Unterseite sichtbares Etikett ist für Patientendaten vorgesehen



 **Riester**
The familiar way

RIE 5260

spirotest

1 Stück

128,85 /St.

Lungenkapazität-Meßgerät, zur exakten und wasserlosen Messung der Lungenkapazität, Kunststoffgehäuse in blau, Messbereich von 1000 bis 7000 cm³, komplett im Karton mit 50 Einmal-Kunststoffmundstücken; für Sportuntersuchungen und Gesundheitsfürsorge in der Praxis oder zu Hause



RIE 11232

Einmal-Pappmundstücke

1 Beutel

54,00 /Btl.

für spirotest, Beutel = 1000 Stück

RIE 11230

Einmal-Kunststoffmundstücke

1 Beutel

14,40 /Btl.

für spirotest, Beutel = 50 Stück



Einmal-Papp- und Kunststoffmundstücke



PARI PEAK FLOW METER

Zur optimalen Selbstkontrolle des Asthmas, mit praktischer Ampelfunktion (grün, gelb, rot) zur Verdeutlichung des aktuellen Gesundheitszustandes. Ein Peak Flow Protokoll verschafft einen Überblick über die Veränderung der Leistungsfähigkeit der Lunge

PAR 031G0000
PAR 031G0001

für Erwachsene
für Kinder

1 Stück
1 Stück

25,60 /St.
25,60 /St.



PEAK FLOW METER für Erwachsene

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖRRatiomed® / **megro**

MEG 690401

Koffer Inhalator

1 Stück

66,90 /St.

Gerät zur Aerosoltherapie, versehen mit Kolben-Elektrokompessor, zuverlässig, keine Schmierung und Wartung erforderlich; das Gerät ist mit einem kompletten Zubehörkit versehen, welches aus einem Zerstäuber, einer Maske, einem Mundstück, 2 Gabelaufsätzen für die Einatmung durch die Nase und einem Verbindungsschlauch besteht; die Zubehörteile sind aus Kunststoff

Technische Daten:

Verneblungsleistung: MMD (durchschnittliche Partikelgröße): 5,44 µm, Betriebsdruck des Verneblers: 0,7 bar, Durchflussrate: 12 l/min, Betriebsdauer: nonstop (oder: Dauerbetrieb)



OMR 07070000

OMRON**OMRON Comp Air C28**

1 Stück

75,55 /St.

professionelles Kompressor-Inhalationsgerät, Verneblungsrate durchschnittlich 0,4 ml/Min., hochwertige Aerosolpartikel, leise Verneblung, einfache Reinigung und Desinfektion, ideal für den Hausgebrauch, effiziente Inhalation durch V.V.T.-Technologie, kompakte Bauform, integrierter Halter für Verneblerteil, praktische Tragetasche für Transport und Aufbewahrung, inkl. Kinder-Erwachsenen-Maske
Maße (BxHxT): 17 x 10,3 x 18,2 cm



OMR 07080000

OMRON Comp Air Pro C29

1 Stück

83,99 /St.

professionelles Kompressor-Inhalationsgerät, Verneblungsrate durchschnittlich 0,4 ml/Min., hochwertige Aerosolpartikel, schnelle Verneblungszeiten, leicht zu reinigen, einfache Ein-Knopf-Bedienung, deckt ein großes medizinisches Anwendungsfeld ab, mit Aufbewahrungsbox, inkl. Kinder-Erwachsenen-Maske
Maße (BxHxT): 18,6 x 18,0 x 21,6 cm

Menge

EURO

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR

PAR 052G1000

PARI COMPACT

1 Stück

121,80 /St.

Die günstige Alternative für die generische Verordnung von Inhalationsgeräten. Kompakter Kompressor in gewohnter PARI Qualität. Einfach zu bedienen und leicht zu reinigen. Mit bewährtem und in Studien getesteten PARI LC PLUS Vernebler für belegte Therapieeffizienz. Weiche Kindermaske und Mundstück mit Ventilsystem für eine effiziente Atemwegstherapie



PAR 085G3000

PARI BOY® SX

1 Stück

193,25 /St.

Inhalationsgerät mit bewährter PARI-Technologie für Patienten ab vier Jahren. Der PARI LC SPRINT Vernebler sorgt für deutlich kürzere Inhalationszeiten. Ein variables Aerosolspektrum ermöglicht den gezielten Einsatz für den zentralen bzw. peripheren Bereich der Lunge. Sparsamer Medikamentenverbrauch durch LC Unterbrecher



PAR 053G1200

PARI TurboBOY® S

1 Stück

168,80 /St.

Ideales Inhalationsgerät für die Therapie der unteren Atemwege für Patienten ab vier Jahren. Der PARI LC SPRINT Vernebler sorgt für kurze Inhalationszeiten bei gleichzeitig effizienter Lungendeposition. Durch die einfache Bedienung fällt selbst Kindern die Inhalation leicht



PAR 053G1300

PARI JuniorBOY® S

1 Stück

180,50 /St.

Gerät für die Inhalationstherapie der unteren Atemwege. Durch seine Ausstattung (weiche BABY Maske, und frei drehbarer BABY Winkel) für Babys ab dem ersten Lebensmonat geeignet. Der PARI LC SPRINT Junior Vernebler sorgt für ein feineres Aerosolspektrum speziell für die kleineren Atemwege von Babys und Kleinkindern



Menge

EURO

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR

PAR 047G1000

PARI BOY® mobile S

1 Stück

278,90 /St.

Der PARI BOY mobile S ist der mobile PARI BOY mit Akku für die Inhalation immer und überall. Das Leichtgewicht unter den PARI Inhalationsgeräten sorgt mit einem leistungsstarken Kompressor für eine effiziente Therapie und wird so zum ständigen, unauffälligen Begleiter - bei der Arbeit, in der Freizeit oder auf Reisen



PAR 028G1000

PARI SINUS

1 Stück

261,50 /St.

Inhalationsgerät zur Therapie der Nase und Nasennebenhöhlen bei akuter und chronischer Sinusitis, Rhinosinusitis und Sinubronchitis. Er erzeugt einen kontinuierlichen Aerosolstrom, der ergänzt wird durch eine pulsierende Druckwelle. Dadurch wird das Aerosol über die Ostien tief in die Nasennebenhöhlen, an den gewünschten Wirkort, befördert

**PARI NaCl Inhalationslösung 0,9 %**

Das Fertiginhalat für die oberen und unteren Atemwege in der praktischen Kunststoffampulle befeuchtet und unterstützt die natürliche Reinigung der Atemwege. Geeignet für die Verneblung in Düsen- oder Ultraschallverneblern. Ohne Konservierungsstoffe

PAR 077G0000

Pack = 20 Ampullen à 2,5 ml

1 Pack

5,13 /Pack

PAR 077G0003

Pack = 60 Ampullen à 2,5 ml

1 Pack

14,00 /Pack

PAR 077G0006

Pack = 120 Ampullen à 2,5 ml

1 Pack

25,48 /Pack



PAR 025G2000

PARI SOLE® N komplett

1 Stück

315,20 /St.

Inhalationsgerät zur Therapie der oberen Atemwege mit feucht-warmem Aerosol zur Linderung von akuten und chronischen Entzündungen, Beschleunigung der Wundheilung nach operativen Eingriffen und Unterstützung der Abwehr bei Erkältungskrankheiten. Je nach Krankheitslokalisation wird mit Mundstück, Nasenstück oder Inhalationsmaske inhaliert

NASENTHERAPIE



Menge

EURO

PAR 177G1010

PARI MONTESOL Nasendusche

1 Stück

10,95 /St.

Effektive und sanfte Reinigung für jede Nase. Optimal geeignet zur Spülung der Nase bei Erkältungskrankheiten wie Schnupfen oder chronischen Entzündungen von Nase und Nasennebenhöhlen sowie bei Pollenflug für Allergiker



PAR 177G1020

PARI MONTESOL Nasenspülung

1 Flasche

8,30 /Fl.

Natürlich und sanft – mit Bad Reichenhaller Natursole und Dexpanthenol. 250 ml Spülkonzentrat in der praktischen Dosierflasche für ca. 30 Anwendungen in der PARI MONTESOL Nasendusche



SAUERSTOFF-MEDIZIN



MEG 125960

Sauerstoffbrille

1 Stück

1,25 /St.

für Erwachsene und Kinder, grüner Doppelkatheter mit superweichem Nasenansatz, liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung, mit 210 cm O₂-Sicherheitsschlauch, einzeln steril verpackt



MEG 125970

Sauerstoff-Maske

1 Stück

2,50 /St.

für Erwachsene, mit Nasenclip, 210 cm langer Schlauch, mit Gummibändern und Universalkonnektor, latexfrei, aus PVC, einzeln steril verpackt



Sauerstoff-Verbindungsschlauch

grün-transparent, mit zwei Softverbindern, latexfrei, aus PVC, einzeln EO-GAS steril verpackt

MEG 125980

210 cm

1 Stück

0,70 /St.

MEG 125983

400 cm

1 Stück

0,90 /St.



MEG 125985

Schlauchverbinder

1 Stück

0,40 /St.

unsteril, für O₂-Brille und O₂-Verbindungsschlauch, aus Kunststoff, latexfrei, grün



SAUERSTOFFKONZENTRATOR

PHILIPS
RESPIRONICS

MEG 690420

**EverFlo**

1 Stück

890,00 /St.

stationärer Sauerstoffkonzentrator, leistungsstark, kompakt und leise, schlankes, ergonomisches Design, leicht zu verstauen und transportieren, wartungsarmer Filter, robuster Sauerstoffausgang aus Metall. Die wenigen beweglichen Teile gewährleisten einen zuverlässigen, problemlosen Betrieb. Lieferung: **inkl. Starter-Kit** bestehend aus: 1 Befeuchterflasche und 1 Nasenbrille (7,6 m Schlauch), latexfrei

Technische Daten:

Gewicht:	15 kg
Stromversorgung:	230 V/50 Hz
Stromverbrauch:	< 300 W
Abmessungen (HxBxT):	58 x 38 x 24 cm
Geräuschpegel:	< 40 dBA
Durchfluss:	0,5 - 5 Ltr. /Min.
Sauerstoffreinheit (bei 5 Ltr. /Min.):	87% - 96%
Sauerstoffprozentanzeige:	Sauerstoff niedrig: 82%
Alarmstufe:	Sauerstoff sehr niedrig: 70%

MEG 690425

**EverGo**

1 Stück

3.980,00 /St.

tragbarer Sauerstoffkonzentrator für unterwegs und zu Hause, mit schwarzer Tragetasche, maximale Sauerstoffabgabe von 1050 ml/min. Das Gerät erkennt den Beginn einer Einatmung und liefert so einen dosierten Sauerstoffimpuls. Steuerung sämtlicher Funktionen mit Anzeige der verbleibenden Akkuleistung sowie der eingestellten Dosis erfolgt über das Touchscreen. Einfaches auswechseln und aufladen der Akkus, kann gleichzeitig geladen und angewendet werden. Wartungsarm, leicht auswechselbarer Filter, der vom Patienten gereinigt werden kann. Lieferung inkl. 2 Lithium-Ionen-Akkus, tragbarer Rollenkoffer, 12V-Kabel, Netzkabel und Zubehörtasche

Technische Daten:

Netzanschluß:	universeller Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,0 A; Ausgang: 18 V DC, 5 A
12V Anschluß:	12-18 V DC, 5 A
Stromverbrauch:	110 W bei 100 VAC (ladend) 120 W bei 240 VAC (ladend) 70 W (nicht ladend)
Sauerstoffkonzentration:	89% +/- 3%
Dosierung der abgegebenen Sauerstoffimpulse:	Einstellung von Stufe 1 bis 6 in halben Schritten
Gewicht:	4,5 kg mit zwei Akkus, 3,9 kg mit einem Akku
Abmessungen (LxBxH):	30,5 x 15,2 x 21,6 cm
Filter:	Grobpartikel, Lufteinlassfilter, Micro-Felt-Filter
Alarmfunktionen bei fallender Sauerstoffkonzentration:	Warnung vor niedrigem Sauerstoffgehalt bei 83 %
Sauerstoffkapazität:	1,05 l/min (dosierte Sauerstoffimpulse)



Menge

EURO

SAUERSTOFFKONZENTRATOR


WEI 13010

OXYMAT 3

1 Stück 1.529,00 /St.

mobiler Sauerstoff-Konzentrator mit Dosiermonitor für Erwachsene, Dosierung 0,5-5 l/min., mit Sprudler-Anfeuchter, Sauerstoff-Brille 2lumig mit Ohrbügeln und 1,5 m Verbindungsschlauch, 20 m Verbindungsschlauch für Dosiermonitor, 3 m Verbindungsschlauch für Sauerstoff-Brille (Ø 4/7 mm)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
 Schalldruckpegel: ≤ 40 dB (A)
 Gewicht: 20 kg
 Maße (HxBxT): 700 x 400 x 350 mm
 (Rollen sind eingelassen)
 Floweinstellung: stufenlos, Markierungen in 0,5er Schritten (l/min) ablesbar
 O₂-Konzentration: 1 bis 4 l/min 95% +1/-3%
 5 l/min 90% +/-3%

**FLASCHENFAHRGESTELL**


MEG 950772

Flaschenfahrgestell mit Zinksockel, für 10 Ltr. Sauerstoff-Flasche, 5 Laufrollen, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, Oberfläche weiß Pulverlack beschichtet, zerlegbar

1 Stück

97,30 /St.



KATHETER**Absaug-Katheter, gerade**

52 cm lang, zentral offen, 2 kleine seitliche Löcher, einzeln steril verpackt, Material: PVC, Shore 75

Pack = 100 Stück



MEG	Größe	Code	Menge	Preis
MEG 125306	Ch. 6	hellgrün	1 Stück	0,35 /St.
MEG 125308	Ch. 8	blau		
MEG 125310	Ch. 10	schwarz		
MEG 125312	Ch. 12	weiß		
MEG 125314	Ch. 14	grün		
MEG 125316	Ch. 16	orange		
MEG 125318	Ch. 18	rot		
MEG 125320	Ch. 20	gelb		

Absaug-Katheter, gebogene Spitze

52 cm lang, zentral offen, 2 kleine seitliche Löcher, einzeln steril verpackt, Material: PVC, Shore 70, silikonisiert

Pack = 100 Stück



MEG	Größe	Code	Menge	Preis
MEG 125408	Ch. 8	blau	1 Stück	0,45 /St.
MEG 125410	Ch. 10	schwarz		
MEG 125412	Ch. 12	weiß		
MEG 125414	Ch. 14	grün		
MEG 125416	Ch. 16	orange		
MEG 125418	Ch. 18	rot		

Absaug-Katheter für Tracheostomietuben

26 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material: PVC

Pack = 100 Stück



MEG	Größe	Code	Menge	Preis
MEG 125008	Ch. 8	blau	1 Stück	0,45 /St.
MEG 125010	Ch. 10	schwarz		
MEG 125012	Ch. 12	weiß		
MEG 125014	Ch. 14	grün		
MEG 125016	Ch. 16	orange		
MEG 125018	Ch. 18	rot		

Absaug-Katheter für Tracheostomietuben

mit K-Ventil, 26 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material: PVC

Pack = 100 Stück



MEG	Größe	Code	Menge	Preis
MEG 125908	Ch. 8	blau	1 Stück	0,49 /St.
MEG 125910	Ch. 10	schwarz		
MEG 125912	Ch. 12	weiß		
MEG 125914	Ch. 14	grün		
MEG 125916	Ch. 16	orange		
MEG 125918	Ch. 18	rot		

Menge

EURO

KATHETER

 Rotimed

Sauerstoff-Katheter mit Komresse

grün, 40 cm lang, zentral offen, PU-Komresse geklebt, weißer Ansatz (m), steril, latexfrei


Pack = 100 Stück

MEG 125808
MEG 125810
MEG 125812
MEG 125814

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün

1 Stück

0,45 /St.

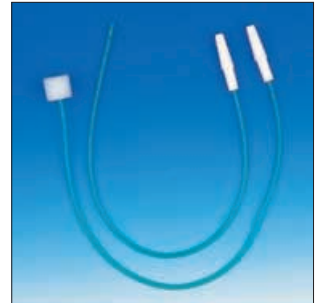

 Rotimed

Frauen-Katheter

18 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen, steril, Material: PVC

Pack = 100 Stück

MEG 125606
MEG 125608
MEG 125610
MEG 125612
MEG 125614
MEG 125616
MEG 125618

Größe	Code
Ch. 6	hellgrün
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot

1 Stück

0,25 /St.



 Rotimed

Nelaton-Katheter

40 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen, steril, Material: PVC

Pack = 100 Stück

MEG 125206
MEG 125208
MEG 125210
MEG 125212
MEG 125214
MEG 125216
MEG 125218
MEG 125220
MEG 125222

Größe	Code
Ch. 6	hellgrün
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett

1 Stück

0,28 /St.



KATHETER

Tiemann-Katheter, steril

40 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen,
Material: PVC, Pack = 100 Stück



MEG 125108
MEG 125110
MEG 125112
MEG 125114
MEG 125116
MEG 125118
MEG 125120
MEG 125122
MEG 125124

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett
Ch. 24	dunkelblau

1 Stück


0,45 /St.


Silcoat-Ballonkatheter, steril

Langzeitkatheter, hohe Verweildauer beim Patienten
(2 bis max. 6 Tage), silikongetaucht, innen Reinlatex,
die Nelatonspitze ist verstärkt und verfügt über große Augen

Typ Nelaton 5/15 ml

VE = 10 Stück

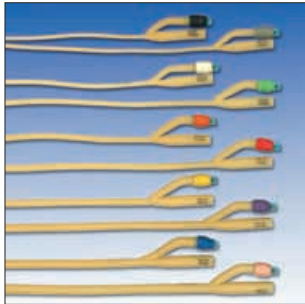

SIL 17605.12
SIL 17605.14
SIL 17605.16
SIL 17605.18
SIL 17605.20
SIL 17605.22
SIL 17605.24
SIL 17605.26

Größe	Code
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett
Ch. 24	dunkelblau
Ch. 26	rosa

10 Stück

1,25 /St.

Typ Kinder 3 ml

VE = 10 Stück

SIL 17180.08
SIL 17180.10

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz

10 Stück

5,00 /St.


Silclear-Ballonkatheter, steril

Langzeitkatheter, hohe Verweildauer beim Patienten
(max. 21 Tage), Vollsilikonkatheter, die Nelaton-
spitze ist verstärkt und verfügt über große Augen

Typ Nelaton 5/10 ml

VE = 10 Stück



SIL 19605.14
SIL 19605.16
SIL 19605.18
SIL 19605.20
SIL 19605.22

Größe	Code
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett

10 Stück

6,50 /St.

Menge

EURO

KATHETER

 Potiomed

Darmrohre, steril

40 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Home-care-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen
Pack = 100 Stück

MEG 125518
MEG 125520
MEG 125522
MEG 125525
MEG 125528
MEG 125530
MEG 125532
MEG 125535

Größe	Code
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett
Ch. 25	blau
Ch. 28	grün
Ch. 30	dunkelgrau
Ch. 32	braun
Ch. 35	grau

1 Stück

0,35 /St.



KATHETER-SETS

 Potiomed

MEG 120810

Typ A

Set bestehend aus:

- 1 x Urinauffangschale
- 1 x Tupferschale
- 3 x Tupfer, pflaumengroß
- 1 x Pinzette
- 2 x Handschuhe Latex, medium, puderfrei
- 1 x Lochschlitztuch, 80 x 45 cm
- 1 x Einschlagtuch, 80 x 45 cm
- 1 x Tüte

Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich!

1 Set

3,60 /Set



MEG 120813

Typ B + Gleitgel 6 ml

Set bestehend aus:

- 1 x Urinauffangschale
- 1 x Tupferschale
- 3 x Tupfer, pflaumengroß
- 1 x Pinzette
- 2 x Handschuhe Latex, medium, puderfrei
- 1 x Lochschlitztuch, 80 x 45 cm
- 1 x Einschlagtuch, 80 x 45 cm
- 1 x Tüte
- 1 x Gleitgel 6 ml

Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich!

1 Set

4,15 /Set



Menge

EURO

KATHETER-SETS

Qatiomed®

MEG 120815



Typ C (Arzneimittel)
+ Gleitgel 6 ml + Octenisept 15 ml

1 Set

6,15 /Set

Set bestehend aus:

- 1 x Urinauffangschale
- 1 x Tupferschale
- 3 x Tupfer, pflaumengroß
- 1 x Pinzette
- 2 x Handschuhe Latex, medium, puderfrei
- 1 x Lochschlitztuch, 80 x 45 cm
- 1 x Einschlagtuch, 80 x 45 cm
- 1 x Tüte
- 1 x Gleitgel 6 ml
- 1 x Octenisept 15 ml

Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich!

MEG 120817



Typ D (Arzneimittel)
+ Gleitgel 6 ml + Octenisept 15 ml
+ 10 ml Spritze 10% Glycerin in Aqua ad injectabilia

1 Set

6,60 /Set

Set bestehend aus:

- 1 x Urinauffangschale
- 1 x Tupferschale
- 3 x Tupfer, pflaumengroß
- 1 x Pinzette
- 2 x Handschuhe Latex, medium, puderfrei
- 1 x Lochschlitztuch, 80 x 45 cm
- 1 x Einschlagtuch, 80 x 45 cm
- 1 x Tüte
- 1 x Gleitgel 6 ml
- 1 x Octenisept 15 ml
- 1 x Spritze, 10 ml 10% Glycerin
in Aqua ad injectabilia im Beipack

Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich!

MEG 120818



Typ F
+ 10 ml Spritze 10% Glycerin in Aqua ad injectabilia

1 Set

4,15 /Set

Set bestehend aus:

- 1 x Urinauffangschale
- 1 x Tupferschale
- 3 x Tupfer, pflaumengroß
- 1 x Pinzette
- 2 x Handschuhe Latex, medium, puderfrei
- 1 x Lochschlitztuch, 80 x 45 cm
- 1 x Einschlagtuch, 80 x 45 cm
- 1 x Tüte
- 1 x Spritze, 10 ml 10% Glycerin
in Aqua ad injectabilia im Beipack

Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich!

KINDER URINBEUTEL

Rotomed® / megro

MEG 122310

Urinbeutel, steril

für Mädchen und Jungen, mit Klebezone,
ohne Ablauf, 100 ml
Pack = 100 Stück

Menge

EURO

1 Pack

25,00 /Pack



B | BRAUN

Urinbeutel für Kinder

zum Ankleben ohne Ablaufschlauch, latexfrei,
PVC-frei, Fassungsvermögen 100 ml
Pack = 10 Stück

BBM 4423038

unsteril

1 Pack

4,51 /Pack

BBM 4425030

einzeln steril

1 Pack

5,15 /Pack



URINBEUTEL

Schlauchlänge 90 cm, für die Bettbefestigung

Rotomed®

MEG 122300

1,5 l Standard, unsteril

1 Stück

0,23 /St.

MEG 122302

2,0 l Standard, unsteril

1 Stück

0,26 /St.

MEG 122304

2,0 l mit Rücklaufstop und Auslauf, unsteril

1 Stück

0,45 /St.

MEG 122305

2,0 l mit Ablasshahn, steril

1 Stück

1,20 /St.



MEG 122300



MEG 122302



MEG 122304



MEG 122305



MEG 122306

URINBEINBEUTEL

Qtiomed®

750 ml
unsteril, mit zentralem Ablauf

Menge

EURO

1 Stück

0,45 /St.



PET 28431

URINDRAINAGESYSTEM**B | BRAUN****Ureofix 112 Plus**

Urindrainagebeutel, steril, mit Ablasshahn,
Probeentnahmestelle, Schiebeklemme,
Pasteur'sche Kammer mit Belüftung,
Antirefluxventil, 1 universeller Haken,
110 cm Überleitungsschlauch
VE = 25 Stück

25 Stück

9,54 /St.



WCF 280-01-11

URINBEUTELHALTER**WÜRTT. CELLULOID-
UND DRAHTWARENFABRIK****Urinbeutelhalter aus Draht**

zum Anhängen an Krankenbetten mit
rundem Bettrahmen, für Beutel 1.500 ccm

1 Stück

1,50 /St.

WCF 290-01-11

Urinbeutelhalter aus Draht

zum Anhängen an Krankenbetten mit
eckigem Bettrahmen, für Beutel 1.500 ccm

1 Stück

1,50 /St.

Menge

EURO

URINFLASCHEN UND -HALTER

Rotomed / megro

MEG 122520 **für Männer** 1 Stück 2,95 /St.
eckig langer Hals, aus **Polypropylen**,
durchscheinend, **autoklavierbar bis 130°C**,
passend für alle üblichen Urinflaschenhalter,
mit anhängendem Deckel aus Polypropylen,
1 Liter Fassungsvermögen, graduiert



MEG 122520



MEG 122521

MEG 122521 **für Frauen** 1 Stück 2,95 /St.
aus Polypropylen, durchscheinend,
autoklavierbar bis 130°C, passend für alle
üblichen Urinflaschenhalter, mit anhängendem
Deckel aus weißem Polyethylen (hitzebeständig
bis 90°C), **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert

MEG 122522 **für Männer** 1 Stück 3,15 /St.
eckig langer Hals, aus **Polyvinylchlorid**,
glasklar, desinfizierbar bis 60°C, passend für alle
üblichen Urinflaschenhalter, mit anhängendem
Deckel aus weißem Polyethylen,
1 Liter Fassungsvermögen, graduiert



MEG 122522



MEG 122523

MEG 122523 **für Männer** 1 Stück 4,75 /St.
eckig langer Hals, **aus Polycarbonat**,
glasklar, **autoklavierbar bis 130°C** (nur PC-
geeignete Reinigungsmittel und Klarspüler verwen-
den), passend für alle üblichen Urinflaschen-
halter, mit anhängendem Deckel aus Polypropylen,
1 Liter Fassungsvermögen, graduiert

WACA

WAL 2531.900 **Urinflasche** 1 Stück 8,80 /St.
mit Verschluss, Material: **PC** (Polycarbonat),
hoch transparent, Sterilisation: Autoklav max.
120°C 10 Min., Gas (Ethylenoxid), chemisch
(Formalin), **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert



**WÜRTT. CELLULOID-
UND DRAHTWARENFABRIK**

WCF 5130-01-11 **Urinflaschenhalter aus Draht** 1 Stück 13,80 /St.
mit Deckel, zur Aufnahme einer Flasche
für männliche Patienten, zum Anhängen an
das Krankenbett und zum Stellen


WCF 512-01-11 **Urinflaschenhalter aus Draht** 1 Stück 9,90 /St.
mit Deckel, Standardausführung,
zur Aufnahme einer Flasche für männliche
Patienten, zum Anhängen an das Krankenbett

WCF 2277 **Urinflaschenhalter aus Draht** 1 Stück 7,90 /St.
mit Deckel, ähnlich wie 512-01-11, jedoch
mit 2 Ringen und leichter Formveränderung



Menge

EURO

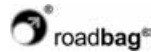TASCHEN-WC

MEG 171500

roadbag® Taschen-WC für Männer

1 Stück

1,95 /St.

wiegt 48 g, 12 x 28 cm groß, auf das handliche Packmaß von 7 x 12 cm zusammengelegt, der Ring-Durchmesser beträgt 5,5 cm. Der in roadbag® eingelegte Innenbeutel enthält einen Superabsorber (chemisch: Polymerkristalle), dieser bindet bis zu 1000 ml Urin (Die normale Miktion beträgt ca. 300 bis 500 ml) und verdichtet ihn zu einem festen Gel – ohne Hautkontakt, hygienisch und geruchlos, nichts läuft aus, das ideale Einwegurinal. Damit ist roadbag® fast jedem (Blasen-)“Druck“ gewachsen.

Jeder Packung roadbag® liegt ein **Erfrischungstuch** für die Hände bei, nach dem Wasserlassen roadbag® mit dem Klebestreifen verschließen und in der beigelegten Tragetasche im Restmüll entsorgen




roadbag®



Superabsorber + Flüssigkeit = Gel



Erfrischungstuch

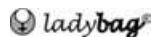TASCHEN-WC

MEG 171502

ladybag® Taschen-WC für Frauen

1 Stück

2,42 /St.

...immer dann, wenn keine andere Toilette in der Nähe ist.

ladybag® nimmt durch den Superabsorber die Flüssigkeit sofort und komplett auf. Das Fassungsvermögen beträgt 1000 ml. Die normale Miktion beträgt ca. 300 bis 500 ml. ladybag® ist hygienisch, zuverlässig, geruchsneutral, diskret und umweltfreundlich.

Jeder Packung ladybag® liegt ein **Erfrischungstuch** für die Hände bei. Nach dem Wasserlassen ladybag® in der beigelegten Tragetasche im Restmüll entsorgen



ladybag®

TASCHEN-WC

Menge

EURO

MEG 171505

Pippi Lissi

1 Pack

3,25 /Pack

Toilettrichter für Frauen

der Sitzkontakt auf fremden Toiletten wird vermieden, so ist man vor Pilzerregern und Bakterien geschützt. Aus Recyclingpapier hergestellt, kann nach Gebrauch einfach in den Abfalleimer geworfen werden, in der Natur löst sich Pippi Lissi durch den Regen von selbst auf. Kann von jeder Frau in der Handtasche mitgenommen werden
Pack = 10 Stück



MEG 171506

TONHY WEE

1 Pack

7,00 /Pack

Minitoilette für unterwegs

geeignet für Kinder, Frauen und Männer. Die Polymerkristalle verwandeln den Urin beim Eintritt in den gewebten Beutel sofort in Gel. Es beugt der Ausbreitung von Bakterien vor und unterdrückt den Uringeruch. Fassungsvermögen max. 600 ml. Der Beutel ist bis zur angegebenen Füllmenge mehrfach nutzbar. Kann nach Gebrauch im Abfalleimer entsorgt werden, mobil einsetzbar
Pack = 3 Stück



TUBENBOY

Rotomed / mcgro

MEG 123075

Tuben-Boy® mit Aufwickelvorrichtung, die ideale Vorrichtung zur problemlosen Entleerung von Tuben aller Art (wie Tuben für Zahnpasta, Creme u.v.a.m), ideal für Haushalt und Praxis, 63 mm lang, Kunststoff Polystyrol, weiß

1 Stück

2,00 /Stk.



**STECHBECKEN**

®atiomed® / **megro**

MEG 636005

aus rostfreiem Edelstahl 18/10
mit Deckel und Flachgriff
für Erwachsene „Standard“,
Maße: Ø 30 cm , 8 cm hoch

Menge

EURO

1 Stück

31,50 /St.

aus rostfreiem Edelstahl 18/10

MEG 636001

bauchige Form und Flachgriff,
mit Deckel, für Erwachsene,
Maße: Ø 31 cm , 8 cm hoch

1 Stück

36,50 /St.

MEG 636002

bauchige Form und Hohlgriff,
mit Deckel, für Erwachsene,
Maße: Ø 31 cm , 8 cm hoch

1 Stück

47,00 /St.

MEG 636004

Deckel mit Knopf für Stechbecken,
Ø 31 cm, einzeln

1 Stück

12,00 /St.

MEG 636003

bauchige Form und Flachgriff,
mit Deckel, für Kinder,
Maße: Ø 23 cm , 7 cm hoch

1 Stück

40,50 /St.



Stechbecken mit Hohlgriff



Deckel



Stechbecken mit Flachgriff für Kinder



MEG 636006

**Stechbecken aus Kunststoff mit
Flachgriff und Deckel für Erwachsene**
aus Polypropylen, autoklavierbar bis 130°C,
Ø 31,2 cm, stapelbar

1 Stück

8,10 /St.

Menge EURO

UMWELT-NIERENSCHALEN



HAR 1141.4200

Saniclin
umweltgerecht produziert, umweltgerecht entsorgt, da aus 100 % Recyclingpapier
Karton = 300 Stück

1 Karton 21,00 /Kart.



HAR 1141.4200



MEG 636020

Einmal-Nierenschalen, grau
aus Holzschliffasener - umweltgerecht produziert, umweltgerecht entsorgt, da aus 100 % Recyclingpapier
Pack = 50 Stück

1 Pack 3,90 /Pack



MEG 636010


NIERENSCHALEN



MEG 636010

aus rostfreiem Edelstahl 18/8, 0,5 Ltr,
Länge 25 cm, Höhe 3,3 cm

1 Stück 4,40 /St.

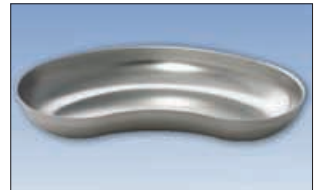

Contacto



aus rostfreiem Edelstahl 18/10

Länge	Höhe	Inhalt
17 cm	3,7 cm	0,25 l
20,5 cm	4,2 cm	0,35 l
25 cm	3,9 cm	0,50 l
27,5 cm	4,5 cm	0,75 l

CON 0201/170

17 cm 3,7 cm 0,25 l

1 Stück 5,50 /St.

CON 0201/200

20,5 cm 4,2 cm 0,35 l

1 Stück 6,80 /St.

CON 0201/250

25 cm 3,9 cm 0,50 l

1 Stück 6,80 /St.

CON 0201/275

27,5 cm 4,5 cm 0,75 l

1 Stück 8,50 /St.



MEG 636015

NIERENSCHALEN POLYPROPYLEN



MEG 636015

weiß, PP, lebensmittelechtes Material,
25 cm lang, **autoklavierbar** bis 130°C

1 Stück 2,85 /St.



MEG 636014

MEG 636014

Einmal aus PP 24 cm
Pack = 300 Stück

1 Pack 55,20 /Pack



WAL 2503.710

Mehrweg-Nierenschale
weiß, PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, Wärmebeständigkeit kurz: 140°C, dauernd: 100°C, Kältebeständigkeit: -30°C, spülmaschinenfest, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), Maße: 26 x 13,7 cm

1 Stück 1,25 /St.



WAL 2503.710



WAL 2503.735
WAL 2503.876

NIERENSCHALEN POLYPROPYLEN

WACA

Mehrweg-Nierenschale

PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, milchig transparent, Wärmebeständigkeit kurz: 140°C, dauernd: 100°C, Kältebeständigkeit: -30°C, spülmaschinenfest, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)
Maße: 26 x 13,7 cm

transparent **rot**
transparent **blau**

Menge

EURO

1 Stück **1,25 /St.**
1 Stück **1,25 /St.**



WAL 2515.710

SPUTUMBECHER

WACA

weiß

Inhalt 410 ml, Material: PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, Wärmebeständigkeit kurz: 140°C, dauernd: 100°C, Kältebeständigkeit: -30°C, spülmaschinenfest, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

1 Stück **2,65 /St.**



CON 1804/085

SPUTUMBECHER

contacto

Sputumbecher ohne Deckel

aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, 0,4 Ltr., Ø 8,5 cm

1 Stück **12,20 /St.**



CON 1544/085

Deckel für Sputumbecher 1804/085

aus Edelstahl 18/10, schwere Qualität, Ø 8,5 cm

1 Stück **5,50 /St.**



CON 1096/085

Sputumbecher mit Klappdeckel

aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, 0,4 Ltr., Ø 8,5 cm

1 Stück **19,50 /St.**

Menge

EURO

MEHRWEG-SCHNABELBECHER / TASSE



für freundlicheres Ambiente im Krankenzimmer und für bessere Unterscheidung zwischen den Pflegestationen; in trendigen Transparentfarben: rot, blau, grün, gelb und natur; ein weiterer Pluspunkt ist die Stapelkante, die den sonst auftretenden Saugeffekt beim Ineinanderstapeln der Becher verhindert, Material: PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, milchig transparent, Wärmebeständigkeit kurz: 140°C, dauernd: 100°C, Kältebeständigkeit: -30°C, spülmaschinenfest, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), Skalierung 50, 100, 150 und 200 ml

Schnabelbecher **Unterteil** ohne Oberteil,
250 ccm

WAL 2521.800	natur	1 Stück	0,75 /St.
WAL 2521.735	transluzent rot		
WAL 2521.865	transluzent grün		
WAL 2521.876	transluzent blau		
WAL 2521.956	transluzent gelb		



Schnabelbecher **Oberteil**

mit 4 mm Öffnung

WAL 2523.800	natur	1 Stück	1,04 /St.
WAL 2523.735	transluzent rot		
WAL 2523.865	transluzent grün		
WAL 2523.876	transluzent blau		
WAL 2523.956	transluzent gelb		



mit 12 mm Öffnung

WAL 2525.800	natur	1 Stück	1,04 /St.
WAL 2525.735	transluzent rot		
WAL 2525.865	transluzent grün		
WAL 2525.876	transluzent blau		
WAL 2525.956	transluzent gelb		

mit 8 x 4 mm Öffnung

WAL 2527.800	natur	1 Stück	1,04 /St.
--------------	-------	---------	-----------



Schnabeltasse

Inhalt 200 ccm, Material: SAN, Wärmebeständigkeit kurz: 95°C, dauernd: 85°C, Kältebeständigkeit: -20°C, spülmaschinenfest, schlagfest, oberflächenhart, sehr hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

WAL 2507.700	glasklar	1 Stück	3,60 /St.
WAL 2507.710	weiß	1 Stück	3,60 /St.



Menge

EURO

TRINKHILFE

WAL 2541.926

**medizinische Trinkhilfe**

1 Stück

2,30 /St.

orange-blau, aus PP, graduiert bis 200 ml, diese Trinkhilfe ermöglicht, dass der Patient – auch im Liegen – das Getränk selbstständig und ohne sich zu verschlucken komplett austrinken kann, dies wird durch die spezielle ergonomische Gestaltung des Deckels und des Trinkstutzens ermöglicht, die es dem Patienten erlaubt, den Becher zu leeren ohne den Kopf bewegen zu müssen



WAL 2543.742

Trinkbecher mit Nasenausschnitt

1 Stück

1,00 /St.

orange, 200 ml, aus PP, unzerbrechlich, spülmaschinenbeständig, mikrowellengeeignet, hygienisch und stapelbar, speziell für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit im Kopf- und Nackenbereich entwickelt, durch die große Aussparung an einer Seite des Becherrandes und dem damit verbundenen günstigen Winkel des Bechers beim Trinken wird der Patient in die Lage versetzt, den Becher selbstständig komplett entleeren zu können

EINNEHMEBECHER UND DECKEL®atiomed® / **megro**

Becher hochtransparent, Inhalt optimal sichtbar, druckfest und bruchsticher, Material: PP
Pack = 75 Stück
30 ml

MEG 123110 E

farblos

1 Pack

1,47 /Pack

MEG 123111 E

blau

50 Pack

1,00 /Pack

MEG 123112 E

rot

MEG 123113 E

gelb

MEG 123114 E

grün

MEG 123115 E

Deckel für ratiomed/megro-Becher
Pack = 75 Stück

1 Pack

1,58 /Pack

MEG 123110 E2

Einnehmebecher farblos mit Deckel
Pack = 75 Becher + 75 Deckel

1 Pack

3,35 /Pack

Menge

EURO

EINNEHMEBECHER

WACA

WAL 2501.700

Einnehmebecher

1 Stück

0,37 /St.

graduirt, 30 ml, glasklar, Material: SAN, Wärmebeständigkeit kurz: 95°C, dauernd: 85°C, Kältebeständigkeit: -20°C, spülmaschinenfest, schlagfest, oberflächenhart, sehr hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)



contacto

CON 5580/030

Medizinbecher

1 Stück

2,40 /St.

30 ml, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, innen graduirt (Messskala ohne Kennziffern: 10, 20 und 30 ml), Ø 5 cm, 2,5 cm hoch



EINNEHMELÖFFEL

Rotomed / mcgro

MEG 123123

weiß, 20 ml, aus Kunststoff

1 Pack

16,70 /Pack

bei der peroralen Applikation gut bewährt, Gesamtinhalt max. 20 ml (graduirt bei: 1 Teelöffel, 1/2 Eßlöffel, 1 Eßlöffel), Material: SAN (Styrol-Acrylnitril), bruchunempfindlich, hygienisch, formbeständig, spülmaschinenfest
Pack = 100 Stück



WACA

Gesamtinhalt max. 20 ml

(graduirt bei: 1 Teelöffel, 1/2 Eßlöffel, 1 Eßlöffel)
Material: SAN, Wärmebeständigkeit kurz: 95°C, dauernd: 85°C, Kältebeständigkeit: -20°C, spülmaschinenfest, schlagfest, oberflächenhart, sehr hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

WAL 2509.710

weiß

1 Stück

0,24 /St.

WAL 2509.700

glasklar

1 Stück

0,24 /St.



contacto

CON 1560/110

11 cm lang

1 Stück

3,30 /St.

aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, innen graduirt bei: 1 Teelöffel, 1/2 Eßlöffel, 1 Eßlöffel





MEG 123105

MEDIKAMENTENDISPENSER

Ratiomed®

4 Unterteilungen, weiß
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel
Pack = 250 Stück

Menge

EURO

1 Stück

0,75 /St.



MEG 123108

Ratiomed®

4 Unterteilungen, weiß
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel
Beschriftung: **deutsch/englisch**
Pack = 250 Stück

1 Stück

0,75 /St.



MEG 123109

Ratiomed®

4 Unterteilungen, blau
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel
Beschriftung: **deutsch/englisch**
Pack = 250 Stück

1 Stück

0,75 /St.



MEG 123101

Ratiomed® / **megro**

groß, weiß
4 extra große Fächer, 4 Unterteilungen –
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel
Pack = 190 Stück

1 Stück

1,50 /St.

Menge

EURO

MEDIKAMENTENDISPENSER

 Rotimed

MEG 123079

für 1 Woche
bestehend aus **7 Tagesschachteln** mit
4 Fächern für morgens, mittags, abends
und nachts, aus hochwertigem Polypropylen,
weiß, handlich, zuverlässig und sicher
Maße (LxBxH): ca. 10,5 x 5,5 x 12,8 cm

1 Stück

7,00 /St.



MEDIKAMENTENDISPENSER-TABLETTS

 Rotimed / **megro**

für 19 Dispenser und 19 Einnehmebecher,
weiß, aus Polystyrol (PS)

MEG 123106

Maße (LxBxH): 42,8 x 32,5 x 1,6 cm

1 Stück

11,90 /St.

MEG 1231060

mit zusätzlichem Boden
Maße (LxBxH): 42,8 x 32,5 x 1,6 cm

1 Stück

16,10 /St.



 HAEBERLE

Medikamententablett „Langenau“

Untersatz aus weißem, Aufsatz aus glasklarem
Kunststoff, inkl. 1 Verordnungsblock

HAE 04705

16 Felder 31 x 31 x 1,8 cm

1 Stück

55,00 /St.

HAE 04706

20 Felder 31 x 39 x 1,8 cm

1 Stück

58,00 /St.

HAE 04707

25 Felder 39 x 39 x 1,8 cm

1 Stück


67,00 /St.

HAE 04708

Ersatzblock
für Medikamententablett „Langenau“,
50 Blatt mit 300 Abrissen

1 Stück

4,60 /St.

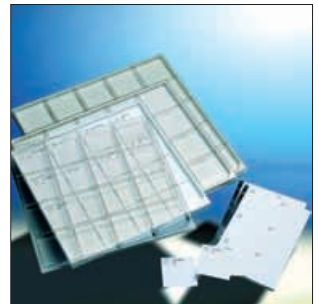

PATIENTENTASCHEN

 Rotimed / **megro**

MEG 180200

Tragetaschen „Patienteneigentum“
für das Eigentum des Patienten bei sofortiger
Einweisung, mit Schriftfeld für Patientendaten, aus
LDPE-Folie, 50 µm, weiß, Maße: 57 x 50 x 8 cm
Karton = 250 Stck.

1 Karton

87,50 /Kart.





MEG 123070

TABLETTENZERKLEINERER

Patiomed®

PILL MATE

mit diesem praktischen Tabletten-Zerkleinerer können Sie: Zerkleinern, halbieren, pulverisieren, aufbewahren
Maße: Ø 40 mm, Höhe 65 mm

Menge

EURO

1 Stück

8,80 /St.



MEG 123060

Tabletteiler

halbiert Tabletten in zwei Teile, zerkleinert mit dem innenliegenden Messer leicht und problemlos auch größere Tabletten durch einfachen Druck, zusätzlich auch als Tabletten-Box verwendbar, passt in jede Tasche, blau, Maße: 83 x 33 x 25 mm (L x B x H), Gewicht: 33 g

1 Stück

3,10 /St.



MEG 123061

Tablettenmörser

verwandelt Tabletten ohne großen Kraftaufwand in leichter schluckbares Tablettenpulver, der große Griff des Mörsers eignet sich besonders für Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit, der Mörser besitzt im Deckel ein Vorratsfach, spülmaschinenfest, blau
Maße: Ø 53 mm, Höhe 40 mm (geschlossen)

1 Stück

5,10 /St.



WAL 2511.700

AUGENBADEBECHER

WACA®

glasklar, anatomisch geformt

dient zu Reinigungszwecken und zum Entfernen von Fremdkörpern und Schmutzteilchen, Augenspülung zu kosmetischen Zwecken mit Kräutern für müde und überanstrengte Augen, Inhalt 25 ml, Material: SAN, Wärmebeständigkeit kurz: 95°C, dauernd: 85°C, Kältebeständigkeit: -20°C, spülmaschinenfest, schlagfest, oberflächenhart, sehr hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

1 Stück

0,40 /St.

Menge

EURO

NAMENSBÄNDER

Anwendung: zur Patientenidentifikation, fest verschließbarer Plastikdruckknopf verhindert unbeabsichtigtes Öffnen, latexfrei, inkl. beschreibbaren Papiereinsteckkarten

Qtiomed® / megro

Standard

Pack = 250 Stück Größe (ca.)

MEG 180100	für Kinder / Säuglinge, rosa	16,5 cm	1 Pack	37,00 /Pack
MEG 180101	für Kinder / Säuglinge, blau	16,5 cm	1 Pack	37,00 /Pack
MEG 180105	für Erwachsene, weiß	24 cm	1 Pack	37,00 /Pack



Precision Dynamics, Veri Color®

widerstandsfähig und komfortabel

Pack = 250 Stück Größe (ca.)

MEG 180111	für Kinder / Säuglinge, weiß	17 cm	1 Pack	71,50 /Pack
MEG 180112	für Kinder / Säuglinge, rosa	17 cm	1 Pack	71,50 /Pack
MEG 180113	für Kinder / Säuglinge, blau	17 cm	1 Pack	71,50 /Pack
MEG 180121	für Erwachsene, weiß	25 cm	1 Pack	71,50 /Pack



KÄMME

Qtiomed® / megro

Material: Celuloseacetat

Erweichende Temperatur bis ca. 75°C

Biugsamkeit: nahezu unzerbrechlich

MEG 600413	Damenkamm, 7 1/2"	Pack = 24 Stück	1 Pack	12,75 /Pack
MEG 600424	Herrenkamm, 6"	Pack = 60 Stück	1 Pack	19,05 /Pack
MEG 600406	Universalkamm, 5"	Pack = 60 Stück	1 Pack	14,70 /Pack
MEG 600418	Staub- u. Nissenkamm	Pack = 24 Stück	1 Pack	19,00 /Pack



TRINKHALME

Qtiomed®

Trinkröhrchen aus Kunststoff, biegsam und knickfest, Ø 6 mm

MEG 161001	einzeln gehülst Karton = 250 Stück	1 Karton	3,80 /Kart.
MEG 161010	Stationspackung Beutel = 50 Stück	1 Beutel	0,85 /Btl.



KIRSCHKERNKISSEN

 bisanz

Kirschkernkissen

als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen, Füllmaterial: Kirschkerne, Bezug: Nylonspezialgewebe, abwaschbar, desinfizierbar und sterilisierbar bis max. 115 °C

BIS 640910.03
BIS 640911

20 x 20 cm orange
40 x 20 cm türkis

1 Stück
1 Stück

18,70 /St.
25,00 /St.

WÄRMFLASCHEN

 Ratiomed

Wärmflasche

hergestellt aus Naturkautschuk, 1,6 Ltr., Farbe: rot, die Wärmflasche kann Verbrennungen verursachen, idealerweise Stoffbezug verwenden

MEG 810000
MEG 810010

Halblamelle
Doppellamelle

1 Stück
1 Stück

3,75 /St.
3,75 /St.

ENTBINDUNGSKEIL


 bisanz

BIS 1341201PU.08 **Entbindungskeil**

1 Stück

50,00 /St.

zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen, Material: sehr fester Schaumstoff mit PU-Beschichtung, schwarz
Maße: 40 x 50 x 12 cm

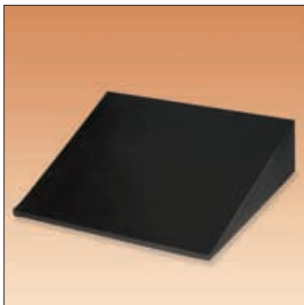

Menge

EURO

NACKENROLLENBEZÜGE FROTTEE

 **megro**

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, beidseitig mit Gummizug, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-TEX Standard 100



Abbildung zeigt Rolle mit Bezug

Bezüge für Rollen Ø 15 cm und Länge 40 cm

MEG 940107.01	Farbe: weiß	1 Stück	8,85 /St.
MEG 940107.02	mint		
MEG 940107.03	viola		
MEG 940107.04	beige		
MEG 940107.05	silbergrau		
MEG 940107.06	gelb		
MEG 940107.07	royalblau		
MEG 940107.08	bordeaux		
MEG 940107.10	apricot		
MEG 940107.13	brombeer		
MEG 940107.15	natur		
MEG 940107.18	jade		
MEG 940107.19	aqua		
MEG 940107.27	marine		
MEG 940107.48	graphit		
MEG 940107.57	apfelgrün		
MEG 940107.69	nougat		
MEG 940107.70	terra		

Bezüge für Rollen Ø 15 cm und Länge 50 cm

MEG 940108.01	Farbe: weiß	1 Stück	9,30 /St.
MEG 940108.02	mint		
MEG 940108.03	viola		
MEG 940108.04	beige		
MEG 940108.05	silbergrau		
MEG 940108.06	gelb		
MEG 940108.07	royalblau		
MEG 940108.08	bordeaux		
MEG 940108.10	apricot		
MEG 940108.13	brombeer		
MEG 940108.15	natur		
MEG 940108.18	jade		
MEG 940108.19	aqua		
MEG 940108.27	marine		
MEG 940108.48	graphit		
MEG 940108.57	apfelgrün		
MEG 940108.69	nougat		
MEG 940108.70	terra		



Druckbedingte Farbabweichungen bei den Musterfeldern sind möglich!



weiß



mint



viola



beige



silbergrau



gelb



royalblau



bordeaux



apricot



brombeer



natur



jade



aqua



marine



graphit



apfelgrün



nougat



terra

Druckbedingte Farbabweichungen bei den Musterfeldern sind möglich!

NACKENROLLENBEZÜGE FROTTEE

®atiomed® / **megro**

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Text Standard 100

Bezüge für Halbrollen, mit Gummizug beidseitig
Höhe 7,5 cm und Länge 40 cm

Farbe: weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
graphit
apfelgrün
nougat
terra

1 Stück

8,85 /St.



Abbildung zeigt Halbrolle mit Bezug

KISSENBEZÜGE FROTTEE

®atiomed® / **megro**

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Text Standard 100

Bezüge 40 x 40 cm, mit Reißverschluss

Pack = 2 Stück

Farbe: weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
graphit
apfelgrün
nougat
terra

1 Pack

15,10 /Pack

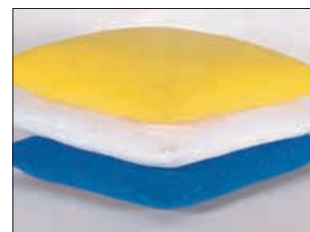


Abbildung zeigt Kissen mit Bezug

Menge

EURO

LAGERUNGSHILFEN



HALBRUNDROLLEN

40 x 22 x 11 cm, Bezug: Kunstleder
vernäht ohne Reißverschluss

- BIS 1340901KL.24 chrom
- BIS 1340901KL.16 creme
- BIS 1340901KL.07 royalblau
- BIS 1340901KL.08 schwarz

1 Stück 34,70 /St.



chrom

creme

KNIEROLLEN

50 x 20 cm, Bezug: Kunstleder
mit Reißverschluss auf der Längsseite

- BIS 1340719KL.24 chrom
- BIS 1340719KL.16 creme
- BIS 1340719KL.07 royalblau
- BIS 1340719KL.08 schwarz

1 Stück 34,80 /St.



royalblau

schwarz


Druckbedingte Farbabweichungen
bei den Musterfeldern sind möglich!

NACKENROLLEN

40 x 13 cm, Bezug: Kunstleder
mit Reißverschluss auf der Längsseite

- BIS 1340710KLRV.24 chrom
- BIS 1340710KLRV.16 creme
- BIS 1340710KLRV.07 royalblau
- BIS 1340710KLRV.08 schwarz

1 Stück 19,10 /St.

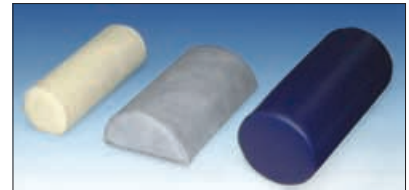

KNIE- UND NACKENROLLEN



Anwendungsgebiet: Zur Therapie und allgemeinen
Lagerung und zur unterstützenden Lagerung der Knie-
gelenke, Material: Weicher Schaumstoff, elastisch und
formbeständig

Bezug: PVC creme, geschweißt

Maße (L x Ø)

- BIS 1340710PVC 40 x 13 cm
- BIS 1340714PVC 50 x 15 cm
- BIS 1340715PVC 65 x 15 cm

1 Stück 14,20 /St.

1 Stück 18,00 /St.

1 Stück 20,90 /St.



Bezug: Kunstleder, seitlich zugezogen

Maße (L x Ø)

- BIS 1340714KL 50 x 15 cm weiß
- BIS 1340714KL.07 50 x 15 cm royalblau
- BIS 1340714KL.10 50 x 15 cm agave

1 Stück 20,90 /St.

1 Stück 20,90 /St.

1 Stück 20,90 /St.

Druckbedingte Farbabweichungen
bei den Musterfeldern sind möglich!



weiß

royalblau

agave

Menge

EURO

HALBROLLEN
 bisanz
Halbrollen

aus Schaumstoff, zur besseren Lagerung des Patienten z. B. der Beine, bei Untersuchungen, OP, Massage, Physiotherapie, Bezug: Kunstleder, **Farbe: weiß**

BIS 1340902KL
BIS 1340915KL

40 x 15 x 7,5 cm
50 x 18 x 9,0 cm

1 Stück
1 Stück

24,90 /St.
36,30 /St.

HALBROLLEN
 dr. paul koch
Halbrollen

ermöglichen eine optimale ergonomische Lagerung. Sehr häufig werden sie im Nacken-, Knie- und Fersenbereich angewendet

PKO 1341300
PKO 1341301

Kunstlederbezug weiß

Gr. 1 40 x 22 x 11,0 cm
Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm

1 Stück
1 Stück

36,86 /St.
25,62 /St.



PKO 1341318

Kunstlederbezug schwarz

Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm

1 Stück

25,62 /St.

GIPSBÄNKCHEN
 dr. paul koch
Gipsbänkchen

aus Schaumstoff, weiß, abwaschbar, 30 x 20 x 20 cm, stützt das Bein beim Eingipsen oder Verbinden, angenehme Lagerung durch kunstlederbezogenen Schaumstoff

PKO 1892000

1 Stück

76,86 /St.



Menge

EURO

WICKELTISCHAUFLAGEN




BIS 1341624KL.02

Wickeltischauflege

Anwendungsgebiet: in der Neugeborenen- und Kinderstation, Material: mittelfester Schaumstoff, Bezug: **Kunstleder** atoll
Maße: 90 x 60 x 4 cm

1 Stück

65,80 /St.

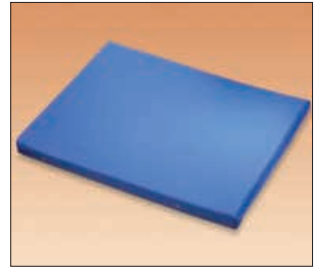

Anwendungsgebiet: in der Neugeborenen- und Kinderstation

Wickeltischauflege mit Aufkantung

durch die seitlichen Aufkantungen ist eine sichere Lagerung des Kindes möglich, größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde, Material: mittelfester Schaumstoff, Bezug: Kunstleder creme
Maße: 60 x 70 x 5/10 cm

BIS 1341803KL.16

2-seitige Aufkantung

1 Stück

94,40 /St.

BIS 1341804KL.16

3-seitige Aufkantung

1 Stück

187,90 /St.



BABYHYGIENE



Quantität in Kunststoff quality in plastic

LOC 135650077

Kamm- und Bürstenset beige bestehend aus: Bürste mit weichem Ziegenhaar und feingezinktem Kamm, Kammlänge ca. 12 cm, Breite ca. 2 cm, Bürstenlänge ca. 14,5 cm, Bürstenkopf ca. 6,5 x 3,5 cm

1 Set

5,00 /Set



BABYHYGIENE

Die Lieferung erfolgt ohne Feuchttuchspender und ohne abgebildetes Zubehör

Lockweiler
Qualität in Kunststoff - quality in plastic

LOC 105790109

Windelbox perlweiß

1 Stück

23,50 /St.

mit Feuchttuchhalter und Ablagen, sorgt für Ordnung und Sicherheit beim Wickeln, passend für ein ganzes Windelpaket Ihrer Windelgrößen, die seitlichen Abstellflächen bieten Platz für Pflegeutensilien und vieles mehr, in die untere Halterung passen viele handelsübliche Feuchttuchspender, Material: Polypropylen
Maße: 26 x 19 x 60 cm (B x T x H)



LOC 103610026

Handwaschbecken blau

1 Stück

4,75 /St.

oval, mit Seifenablage, ein Zubehör der Badausstattung, ideal für den Alten- und Pflegebereich, sowie zur Babyhygiene geeignet, Material: Polyäthylen, Inhalt 7 Liter
Maße: 45 x 30 x 13 cm



LOC 106431127

Windeleimer classic marineblau

1 Stück

6,00 /St.

11 Ltr., für die hygienische und geruchfreie Entsorgung von Windeln, mit Deckel und Kunststoffbügel, Ø 26 cm, Höhe mit Deckel ca. 29 cm

Menge

EURO

KOPF- UND NACKENKISSEN



BIS 640800PU

Kopflagerungskissen flach, agave 1 Stück
22 x 22 x 5 cm, für die Kopflagerung auf der Untersuchungs-/Behandlungsliege bzw. für OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage. PU-Beschichtung, abwaschbar/desinfizierbar

34,50 /St.



BAUCLAGEKISSEN



PIN 40800

Bauchlagekissen, dunkelblau 1 Stück
Spezialkissen für die Therapie in der Bauchlage, entspannt die Nackenmuskulatur während der Therapie, anatomisch dem Gesicht angepasst, Stirnsenke ermöglicht druckfreies Liegen, stützt den Schulterbereich und entlastet den Rücken, Nase und Mund liegen frei, das Atmen wird durch die vordere und die seitlichen Luftöffnungen erleichtert, Material: Komfortschaum mit Latexauflage, Bezug: SKAI-Leder, desinfizierbar, Maße: 46 x 35 x 10,5 cm

89,99 /St.



LAGERUNGSKISSEN



PKO 1345050

Baby-Seitenlagerungskissen 1 Stück
weiß, mit Kunstlederbezug, zur sonographischen Untersuchung von Babys und Kleinkindern, die Babys liegen entspannt und optimal gelagert zwischen zwei weichen, aber formstabilen Schaumstoff-Seitentteilen. Mit Klettbindern kann das Seitenlagerungskissen eingestellt werden
Maße: Grundplatte: 63 x 38 x 4 cm, Seitenteile: 45 x 13 x 10 cm

256,15 /St.



Lagerungskissen aus Styropor, finden ihren Einsatz zur Lagerung und seitlichen Abstützung von Kranken, werden sehr gerne zur Anti-Decubitus-Prophylaxe eingesetzt, der Kunstlederbezug ist abwaschbar und desinfizierbar

PKO 1348000
PKO 1348100
PKO 1348200

40 x 30 cm
70 x 30 cm
80 x 60 cm

1 Stück 20,84 /St.
1 Stück 34,13 /St.
1 Stück 43,10 /St.



Menge

EURO

**SANDSÄCKE**

dr. paul koch

Anwendungsgebiet: Zur Lagerung und seitlichen Abstützung von Extremitäten, kleinere Säcke werden zur Beschwerung von postoperativen Wunden verwendet, Material: Kunstleder, abwaschbar

PKO 1347000	15 x 10 cm, 0,4 kg	1 Stück	8,24 /St.
PKO 1347001	20 x 10 cm, 0,5 kg	1 Stück	8,72 /St.
PKO 1347004	30 x 15 cm, 2 kg	1 Stück	10,29 /St.
PKO 1347006	50 x 15 cm, 3 kg	1 Stück	15,75 /St.

**bisanz****Sandsäcke, weiß**

Anwendungsgebiet: Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten, Stabilisierung von Schienen oder zur Beschwerung postoperativer Wunden, Kunstleder-Bezug, abwaschbar, Quarz-Sand-Füllung

BIS 600011	20 x 15 cm, 1 kg	1 Stück	9,60 /St.
BIS 600019	20 x 20 cm, 1,5 kg	1 Stück	9,80 /St.
BIS 600021	30 x 20 cm, 2,5 kg	1 Stück	13,10 /St.

**BEINLAGERUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR**

dr. paul koch

Beinschiene

die **aufblasbare** Beinschiene Kochairsplint KAS dient zur Hochlagerung des Beines bei Knochenbrüchen, Erste-Hilfe-Versorgung und Venenentzündungen etc. Sie vereint die Vorteile der Schaumstoffhochlagerungsschiene mit der Möglichkeit der platzsparenden Verstaubarkeit der Schiene, selbst auf Reisen ist die optimale Beinhochlagerung möglich

PKO 8040010	Kochairsplint KAS inkl. Handpumpe	1 Stück	62,92 /St.
PKO 8040020	Kochairsplint KAS inkl. Baumwollbezug und Handpumpe	1 Stück	83,82 /St.
PKO 8040030	Baumwollbezug für aufblasbare Beinschiene Kochairsplint KAS	1 Stück	31,42 /St.

Menge


EURO

BEINLAGERUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR



Zur Flachlagerung

- | | | | |
|------------|---|---------|------------|
| BIS 711000 | Beinlagerungsschiene "3"
für Erwachsene, ohne Bezug, 75 x 25 cm, zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen | 1 Stück | 45,70 /St. |
| BIS 711002 | Trikotbezug
75 cm, aus Baumwolle, weiß, 25 cm breit mit Haken- und Flauschband, zu Art. 711000 | 1 Stück | 33,50 /St. |
| BIS 711004 | Kunstlederbezug
75 cm, weiß, 25 cm breit mit Haken- und Flauschband, zu Art. 711000 | 1 Stück | 46,10 /St. |

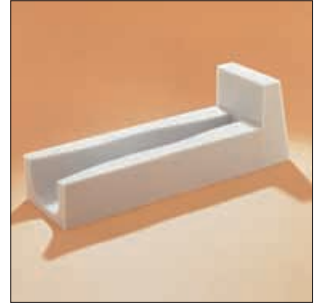


Trikotbezug Kunstlederbezug
Druckbedingte Farbabweichungen bei den Musterfeldern sind möglich!

BEINLAGERUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR




Zur Flachlagerung

- | | | | |
|-------------|---|---------|------------|
| PKO 1532800 | Schaumstoffschiene
für Erwachsene, ohne Bezug, 75 x 30 cm, mit Kunststoff-Sohle, zur Lagerung des gestreckten Beins, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung, an der Sohle ist die Schiene durch eine Kunststoffplatte verstärkt, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen | 1 Stück | 63,00 /St. |
| PKO 1534100 | Skaibezug
aus Kunstleder, weiß, zu Art. 1532800 | 1 Stück | 44,94 /St. |

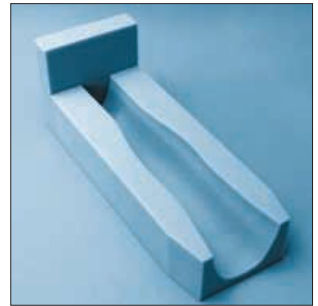

Zur Hochlagerung

- | | | | |
|-------------|--|---------|------------|
| PKO 1533800 | Beinhochlagerungsschiene
nach Schulze, ohne Bezug, Gr. 1 75 x 25 cm, mit Kunststoff-Sohle, zur Lagerung des Beines bei Knochenbrüchen, Verrenkungen, Quetschungen, Erste-Hilfe-Versorgung und kurzfristigen Behandlungen sowie Venenentzündungen und Thrombosen. Das aus Kunststoff bestehende, gepolsterte Fußbett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung, der Schaumstoff ist weich, wodurch keine Durchblutungsstörungen entstehen, leicht desinfizierbar | 1 Stück | 56,70 /St. |
| PKO 1533804 | Skaibezug Gr. 1
aus Kunstleder, weiß, zu Art. 1533800 | 1 Stück | 44,36 /St. |

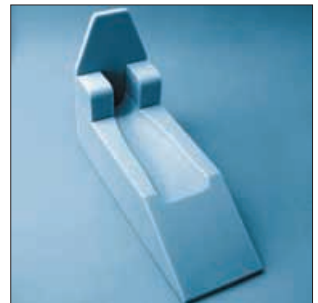



SÖH 0604014
SÖH 0604015
SÖH 0604016
SÖH 0604017

SÖH 0604020
SÖH 0604021

SÖH 0604005
SÖH 0604006
SÖH 0604011
SÖH 0604012
SÖH 0604007
SÖH 0604010



SCHIENEN UND STÜTZEN

SÖHNGEN®

Pneumat

aufblasbare 4-Kammer-Schienen

zur schonenden und sicheren Schienung von Extremitäten-Frakturen bei Erwachsenen und Kindern, Arm oder Bein ruhen in einem stabilisierenden Luftpolster, es können keine Nervenschädigungen oder Durchblutungsstörungen auftreten, beidseitig beschichtetes Polyestergewebe, orange, strapazierfähig, temperaturbeständig, vier Luftkammern, gleichzeitig über ein Auf-Zu-Ventil zu bedienen, röntgenstrahlendurchlässig

Erwachsene

Schiene für ganzen Arm	1 Stück	75,00 /St.
Schiene für ganzes Bein	1 Stück	88,00 /St.
Polsterkissen/Tragetasche	1 Stück	24,00 /St.
3-teiliger Schienensatz	1 Satz	183,00 /Satz
bestehend aus: Schiene ganzer Arm, Schiene ganzes Bein, Polsterkissen/Tragetasche		

Kinder

Schiene für ganzen Arm	1 Stück	63,00 /St.
Schiene für ganzes Bein	1 Stück	72,00 /St.

Pneuplast

aufblasbare 4-Kammer-Schienen

zur schonenden und sicheren Schienung von Extremitäten-Frakturen bei Erwachsenen, Arm oder Bein ruhen in einem stabilisierenden Luftpolster, es können keine Nervenschädigungen oder Durchblutungsstörungen auftreten, Kunststoff-Spezialfolie, orange, strapazierfähig, temperaturbeständig, vier Luftkammern, gleichzeitig über ein Ventil zu bedienen, röntgenstrahlendurchlässig

Erwachsene

Schiene für ganzen Arm	1 Stück	25,00 /St.
Schiene für ganzes Bein	1 Stück	34,00 /St.
Schiene für halben Arm	1 Stück	22,00 /St.
Schiene für halbes Bein	1 Stück	27,00 /St.
Polsterkissen/Tragetasche	1 Stück	15,00 /St.
5-teiliger Schienensatz bestehend aus:	1 Satz	118,00 /Satz
Schiene ganzer Arm, Schiene ganzes Bein, Schiene halber Arm, Schiene halbes Bein, Polsterkissen/Tragetasche		

Menge

EURO

FIXIERUNGEN UND ZUBEHÖR



Haftbandfixierungen ohne Polster
zur Sicherung des Patienten, aus gewebtem
Haftband mit Metallschlaufen, Innenseite
ungepolstert

VE = 10 Stck.

BIS 780003

30 x 5 cm

10 Stück

3,10 /St.

BIS 780004

40 x 5 cm

10 Stück

3,50 /St.

Haftbandfixierungen mit Polster
zur Sicherung des Patienten, aus gewebtem
Haftband mit Metallschlaufen, Innenseite
gepolstert mit kaschiertem Schaum

VE = 10 Stck.

BIS 780103

30 x 5 cm

10 Stück

4,00 /St.

BIS 780104

40 x 5 cm

10 Stück

4,80 /St.

BIS 510001

Hand-/Fußgelenkfixierungsgurte

1 Paar

32,90 /Paar

7 cm breit, zur Sicherung des Patienten im
Bett, aus stabilem Band mit synthetischem
Fell **gepolstert**, Haftbandverschluss,
Gurtband: 170 cm lang



SEGUFIX®-HUMANE FIXIERUNGEN



SEG 2201-M

SEGUFIX®-Standard mit Magnet-
verschluss

1 Set

103,70 /Set

zur Decubitus-Prophylaxe/-Therapie
und humanen Fixierung, Gurtbreite 18 cm
Gr. M = 80-120 cm

bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard (mit integrierten Seiten-
befestigungen, sind mit dem Bauchgurt fest
verbunden, nicht abnehmbar)
- 3 SEGUFIX®-Patentschlösser
- 2 SEGUFIX®-Magnetschlüssel



Menge

EURO

SEGUFIX®



- SEG 2203-M **SEGUFIX®-Schulterhalterung X-Form mit Magnetverschluss** 1 Set **39,10 /Set**
für Erwachsene, verhindert das Herauswinden aus der SEGUFIX®-Standard nach oben
Gr. M = 80-120 cm
bestehend aus:
1 Schultergurt
1 SEGUFIX®-Patentschloss **ohne** SEGUFIX®-Magnetschlüssel



- SEG 2204-M **SEGUFIX®-Handhalterung mit Magnetverschluss** 1 Set **30,90 /Set**
für Erwachsene, flexible Fixierung einer oder beider Hände, verhindert Selbstverletzung/Verletzung anderer durch Patienten
Umfang: 14-20 cm
bestehend aus:
2 Handmanschetten
2 SEGUFIX®-Patentschlösser **ohne** SEGUFIX®-Magnetschlüssel



- SEG 2205-M **SEGUFIX®-Fußhalterung mit Magnetverschluss** 1 Set **53,70 /Set**
für Erwachsene, lockere oder feste Fixierung eines oder beider Füße, Umfang: 21-27 cm
bestehend aus:
2 Fußmanschetten
1 Verbindungsgurt
4 SEGUFIX®-Patentschlösser **ohne** SEGUFIX®-Magnetschlüssel

- SEG 1206 **SEGUFIX®-Patentschloss** 1 Stück **6,40 /St.**
zum sicheren Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

- SEG 1208 **SEGUFIX®-Magnetschlüssel** 1 Stück **4,00 /St.**
zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-Patentschlösses

- SEG 1209 **SEGUFIX®-Magnetschlüssel mit Anhänger** 1 Stück **4,60 /St.**
zum Anhängen an Kittel oder Gürtel



SEGUFIX®-Patentschloss



SEGUFIX®-Magnetschlüssel



SEGUFIX®-Magnetschlüssel mit Anhänger

Menge

EURO

SEGUFIX®-HUMANE FIXIERUNGEN**SEGUFIX®**

SEG 2224-M

SEGUFIX®-Handhalterung mit Magnetverschluss

verlängerte Ausführung,
 - für Anwendung ohne SEGUFIX®-Standard
 - direkt am Krankenbett zu befestigen
 Umfang: 14-20 cm
 bestehend aus:
 2 SEGUFIX®-Handmanschetten lang
 4 SEGUFIX®-Patentschlösser
 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

1 Set

52,20 /Set



SEG 4213/R-M

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter

robust, für Erwachsene, Akutfixierung für unruhige Patienten. Dieser Artikel darf nur in Verbindung mit der Akut-Fixierung-Hand (Artikel-Nr. 42141) und Akut-Fixierung-Fuß (Artikel-Nr. 4215) benutzt werden
 Umfang: 74-114 cm
 bestehend aus:
 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Schulter
 5 SEGUFIX®-Patentschlösser **ohne** SEGUFIX®-Magnetschlüssel

1 Set

116,50 /Set



SEG 4214/R-M

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand, robust

Akutfixierung für unruhige Patienten
 Umfang: 14-24 cm
 bestehend aus:
 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Hand
 4 SEGUFIX®-Patentschlösser
 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

1 Set

79,10 /Set



SEG 4215/R-M

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß, robust

Akutfixierung für unruhige Patienten
 Umfang: 18-28 cm
 bestehend aus:
 1 SEGUFIX®-Akut-Gurt-Fuß
 5 SEGUFIX®-Patentschlösser
 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

1 Set

79,10 /Set



SEG 6256/V-S

SEGUFIX®-Multigurt 180 cm mit Klett- und Magnetverschluss

als Sitzhilfe für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten. Auch für Tragen im Rettungsdienstbereich geeignet
 bestehend aus:
 1 SEGUFIX®-Multigurt
 1 SEGUFIX®-Patentschloss
 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

1 Set

53,20 /Set





SEG 6266

SEGUFIX®

SEGUFIX®-Beckengurt

mit **Magnetverschluss**, 74 cm lang
als Sitzhilfe auf geeigneten Sitzgelegenheiten
bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Beckengurt
- 2 SEGUFIX®-Patentschlösser
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

Menge

EURO

1 Set

60,30 /Set



SEG 8013

SEGUFIX®-Schutzbezug

der SEGUFIX®-Schutzbezug schützt den
SEGUFIX®-Multigurt und SEGUFIX®-Beckengurt
vor Verschmutzungen.

Dieser Schutzbezug ist bis zu 95° C waschbar
und dampfsterilisierbar. Er ist bakteriendicht.
Material: Der Träger besteht zu 100 % aus Poly-
ester, die Beschichtung aus 100 % Polyurethan

1 Stück

9,90 /St.



SEG 7240-M

SEGUFIX®-Sitzgurt
mit **Magnetverschluss**

für Erwachsene, eine gute Haltevorrichtung
für den Rollstuhl und andere Sitzgelegenheiten,
verhindert eigenständiges Aufstehen des Patien-
ten, Rückenlehnen-Umfang: 70-115 cm, Gurt-
breite: 14 cm, Gr. M, Taillen-Umfang: 80-120 cm
bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Sitzgurt
- 1 SEGUFIX®-Patentschloss
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

1 Set

83,90 /Set



SEG 6240-M

SEGUFIX®-Rückhaltegurt
mit **Magnetverschluss**

zur Stützung des sitzenden kooperativen Patienten.
Stützt den Oberkörper und verhindert gleichzeitig
ein Abrutschen von der Sitzfläche. Befestigung
hinter der Rückenlehne mit Magnetverschluss,
Gr. M, Umfang: 90-130 cm, Verbindung: 13 cm,
Kopfdurchlass: 35 cm
bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt
- 1 SEGUFIX®-Patentschloss
- 1 SEGUFIX®-Magnetschlüssel

1 Set

135,90 /Set

SEGUFIX®-
Dreh-PatentschlossSEGUFIX®-
Dreh-Magnet-
schlüssel

SEG 1210

SEGUFIX®-Dreh-Patentschloss

zum sicheren Verschließen der SEGUFIX®-
Systeme (nur für Bandagen ab Herstellungs-
quartal II/2003)

1 Stück

11,60 /St.

SEG 1212

SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel

zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-
Dreh-Patentschlusses

1 Stück

6,40 /St.

VERBANDNÄSSESCHUTZ

PRAMETA

Aqua Protect

ist ein Schutzüberzug aus hautfreundlichem Polyurethan, die Beinmodelle haben eine rutschfeste Sohle, die für Halt und Sicherung sorgt, das Material ist absolut frei von Latex

		Menge	EURO
PRÄ AP17	Unterarm, klein	1 Stück	10,59 /St.
PRÄ AP21	Unterarm, groß	1 Stück	11,55 /St.
PRÄ AP26	Oberarm, klein	1 Stück	13,36 /St.
PRÄ AP31	Oberarm, groß	1 Stück	15,21 /St.
PRÄ LP20	Unterschenkel, klein	1 Stück	16,18 /St.
PRÄ LP25	Unterschenkel, groß	1 Stück	18,36 /St.
PRÄ LP33	Oberschenkel, klein	1 Stück	21,68 /St.
PRÄ LP44	Oberschenkel, groß	1 Stück	23,95 /St.



DUSCHHOCKER

/ **megro**

MEG 990310

Duschhocker Standard

weiß, Gummifuß: grau, ohne Saugnapf, Sitzfläche: rund (Ø 32 cm), mit Öffnungen für Wasserablauf, Sitzhöhe: von 47 - 64 cm einstellbar, Füße abnehmbar und somit platzsparend zu verstauen, Belastbarkeit 120 kg

1 Stück 49,90 /St.



platzsparende Unterbringung durch abnehmbare Füße



Menge

EURO

DUSCHHOCKER

MEG 990317

Patiomed® / megro

Duschhocker

1 Stück

95,00 /St.

weiß, mit Armlehnen, starr, der stabile und pulverbeschichtete Aluminiumrahmen erlaubt den problemlosen Einsatz in Feuchträumen, die 4-fach höhenverstellbaren Standfüße mit Gummikappen ermöglichen eine individuelle und schnelle Anpassung, gepolsterte Sitzfläche mit Intimausschnitt

Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40 cm,

Sitzhöhe: 46-53 cm, Seitenteilhöhe: 20 cm,

Gesamtbreite: 53,5 cm, Gesamtlänge: 72 cm, Gesamthöhe: 64-71 cm, max. Belastbarkeit: 120 kg

DUSCHKLAPPSITZ

MEG 990318

Patiomed® / megro

Duschklapsitz

1 Stück

99,90 /St.

weiß, zur Wandmontage, der stabile und pulverbeschichtete Aluminiumrahmen erlaubt den problemlosen Einsatz in Feuchträumen, die 4-fach höhenverstellbaren Standfüße mit Gummikappen ermöglichen eine individuelle und schnelle Anpassung, gepolsterte Sitzfläche mit Intimausschnitt

Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40 cm,

Sitzhöhe: 47-57 cm, Gesamtbreite: 47 cm,

Gesamtlänge: 49 cm, Gesamthöhe: 47-57 cm,

max. Belastbarkeit: 120 kg

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL

MEG 990295

Patiomed® / megro

Duschtoilettenstuhl

1 Stück

330,00 /St.*

*+7% MwSt.

mit Lenkrollen, die nach oben klappbaren Armlehnen und klappbare Beinstütze erlauben die umfangreiche Verwendung im Alltag, pulverbeschichtete Aluminiumrahmen, vier 5"-Schwenkrollen (davon zwei Totalfeststeller), Einsatz für geschlossene Sitzfläche, Fußplatte höhenverstellbar, gepolsterte Armlehne und Sitzfläche, ergonomisch geformte Rückenlehne, ohne Toiletteneimer
Sitzbreite: 44 cm, Sitztiefe: 42 cm, Sitzhöhe: 53 cm, Seitenteilhöhe: 22,5 cm, Gesamtbreite: 55 cm, Gesamtlänge: 84 cm, Gesamthöhe: 93 cm, Gewicht: 12,1 kg, max. Belastbarkeit: 120 kg

Menge

EURO

BADEWANNENBRETT



AQUATEC

MEG 990125

MARINA

1 Stück

55,00 /St.

weiß, mit Handgriff, robustes, pflegeleichtes Material, abgerundete Kanten und die geschlossene Oberfläche erleichtern dem Nutzer das Umsetzen, rutschsichere Sitzfläche, integrierte Seifenablage, durch Verstellschienen individuell anpassbar und sicher in der Wanne fixiert, praktischer Duschbrausehalter auf beiden Seiten
Maße (BxTxH): 33 x 69 x 16 cm, Handgriff 18 cm breit, Verstellbereich Innenmaß: 39-63 cm, Gewicht: 1,6 kg, Belastbarkeit: 150 kg



BADEWANNENLIFTER UND ZUBEHÖR



AQUATEC

MEG 990102

AQUATEC ORCA

1 Stück

775,00 /St.

akkubetriebener Badewannenlifter, weiß, mit Bezug, mit absenkbarer Rückenstütze, in 2 Teile zerlegbar, hohe Rückenlehne (bis 40° absenkbar) mit integrierter Nackenstütze, einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen, Sitzbreite ohne Seitenklappen: 37,5 cm, Sitztiefe: 49 cm, Sitzhöhe max. 42 cm, Sitzhöhe min. 6 cm, Gewicht 7,5 kg, Belastbarkeit 135 kg



TRANSFERHILFE



AQUATEC

MEG 990110

AQUATEC DISK

1 Stück

84,00 /St.

Drehscheibe, zum einfachen Übersetzen auf den Badewannenlifter, grau, Sitzfläche dreht ganz leicht, weiche, hautfreundliche Beschichtung, pflegeleicht und einfach abwischbar, Höhe: 2,3 cm, Durchmesser: 36,5 cm, Belastbarkeit: 130 kg



TOILETTENSITZERHÖHUNGENRotimed® / **megro**

MEG 990198

Toilettensitzerhöhung

1 Stück

99,00 /St.

mit Armlehnen und Deckel, weiß, drei verschiedene Sitzhöhen (7, 10 bzw. 14 cm) und Sitzwinkel einstellbar, hochklappbare Armlehnen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen, bei Bedarf kann auch nur eine einzelne Armlehne montiert werden, mit integriertem Spritzschutz, feste Montage auf dem Toilettenbecken für eine sichere Sitzposition, leicht zu montieren und demontieren, einfache Reinigung

Technische Daten

Sitzbreite:	36 cm
Sitztiefe:	39 cm
Gesamtbreite mit Armlehnen:	57 cm
Gesamtbreite ohne Armlehnen:	39,5 cm
Gesamttiefe:	48 cm
Belastbarkeit:	120 kg



AQUATEC 900

TOILETTENSITZERHÖHUNGEN

AQUATEC 90 ohne Deckel

MEG 990200

AQUATEC 900

1 Stück

140,00 /St.

Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen und Deckel, weiß, drei verschiedene Sitzhöhen (6, 10 bzw. 15 cm) und Sitzwinkel einstellbar, blitzschnelle, einfache Montage durch Schnellspanverschraubung, Belastbarkeit 120 kg

AQUATEC 90

aufsteckbare Toilettensitzerhöhung, weiß, erhöht den Toilettensitz um 10 cm, einfache und sichere Fixierung auf dem WC-Becken, großer Hygieneausschnitt für optimale Intimpflege, hohe Belastbarkeit 225 kg



AQUATEC 90 mit Deckel

MEG 990201

ohne Deckel

1 Stück

55,00 /St.

MEG 990202

mit Deckel

1 Stück

60,00 /St.

Menge

EURO

TOILETTENSTUHL UND ZUBEHÖR

 **megro**

MEG 964400

Standard

1 Stück

109,00 /St.*

*+7% MwSt.

stabile Rahmenkonstruktion aus verchromtem Stahlrohr, Rückenteil mit Armlehnen und Schieb- stange, komplett abnehmbar, Halterung des Toiletten- eimers an der Sitzbrille; Toiletteneimer mit Deckel von hinten herausnehmbar, Seitenteile nach unten abschwengbar, Armlehnen gepolstert, Beinstützen mit Wadenband, Beinstützen abnehm- und abschwengbar, Fußplatten aus Kunststoff, vier Schwenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller,

Technische Daten:

Überfahrhöhe: 42 cm
Sitzbreite: 46 cm
Gesamtbreite: 56 cm
Sitzhöhe: 50 cm
Sitztiefe: 42 cm
Rückenhöhe: 47 cm
Gesamthöhe: 96 cm
Gesamtlänge: 83 cm
Radabstand: 59 cm
Belastbarkeit: 120 kg



MEG 965600

Toiletten-Eimer

1 Stück

7,80 /St.

aus Kunststoff, grau, Fassungsvermögen ca. 7 Ltr., Innen Ø ca. 26 cm, Außen Ø ca. 30 cm, mit Deckel, Geruchsverschluss, Bügel verzinkt



CON 0610/260

 **contacto**

Nachtstuhl-Einsatz

1 Stück

68,00 /St.

aus Edelstahl 18/10, mit Deckel, 4 Ltr., Ø 30,5 cm



GUMMI-SITZRING

 **Patiomed**

MEG 965700

45 cm Ø, orange

1 Stück

19,50 /St.

sehr gut als Sitzkissen für Patienten geeignet, die für längere Zeit auf den Toilettenstuhl angewiesen sind



REGENCAPEPatiomed® / **megro**

MEG 964390

Regencape

1 Stück

35,70 /St.

für Erwachsene im Roll- und E-Roll-Stuhl, aus leichtem wasserdichten Nylonmaterial, mit Kapuze und seitlichen Sichtfenstern, auf der Vorderseite des Capes befindet sich eine Brusttasche, ohne Arm, mit Gummizug, Klett- und Reißverschluss, Farbe: marineblau

**GEHSTÖCKE**Patiomed® / **megro**

MEG 961810

Gehstock Classic

1 Stück

15,90 /St.

bronze-eloxiert, beidseits, höhenverstellbar, faltbar, der Aluminium-Gehstock für links und rechts ist individuell anpassbar, gefaltet lässt sich der Gehstock bequem verstauen und ist unterwegs immer parat, körpergerecht höhenverstellbar von 83 bis 93 cm, rutschfester Gummifuß, max. zulässiges Benutzergewicht 100 kg, Gewicht: 400 g

Patiomed® / **megro**

MEG 961820

Anatomischer Gehstock

1 Stück

15,90 /St.

bronze-eloxiert, rechts, höhenverstellbar, aus Aluminium gefertigt für eine sichere und leichte Fortbewegung, körpergerecht höhenverstellbar von 77 bis 100 cm, rutschfester Gummifuß, max. zulässiges Benutzergewicht 100 kg, Gewicht: 400 g

Menge

EURO

UNTERARMGEHSTÜTZEN

Rotomed® / megro

10-fach höhenverstellbar, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, kräftige, verwindungssteife Armschale, stabiler Fuß mit großer Auflagefläche, mit einzigartigem Abstellsystem, CE gekennzeichnet, bis 130 kg belastbar

MEG 961901
MEG 961902
MEG 961903
MEG 961904
MEG 961905
MEG 961906
MEG 961907
MEG 961908
MEG 961909

lichtgrau
enzianblau
feuerrot
minttürkis
tiefschwarz
chromgelb
weinrot
blaulila
türkisblau

1 Paar

16,50 /Paar*
* +7 % MwSt.



Gehilfe-Kappen



Reflektor



Druckbedingte Farbabweichungen bei den Musterfeldern sind möglich

UNTERARMGEHSTÜTZEN

Rotomed® / megro

für Kinder


Armschale 3-fach verstellbar, Röhrlänge 10-fach verstellbar, CE gekennzeichnet, bis 100 kg belastbar

MEG 962412
MEG 962417

blau/bunt
gelb/bunt

1 Paar

24,99 /Paar*
* +7 % MwSt.

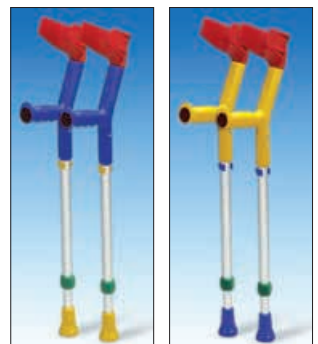

Unterarmgehstützen für Kinder

MEG 962900

Gehilfe-Kappe
grau, 19 mm

1 Stück

4,20 /St.



MEG 961850

4-FUß GEHHILFERotiomed® / **megro****Vierfuß-Gehhilfe**

mit anatomischem Griff und rutschfesten Gummifüßen, schafft Stabilität beim Gehen, Aluminium bronze-eloxiert, höhenverstellbar von 75 - 90 cm, Belastbarkeit: 100 kg

Menge

EURO

1 Stück

33,80 /St.*
* +7 % MwSt.



MEG 961861

GEHGESTELLERotiomed® / **megro****Gehgestell für Erwachsene**

stabiler Rahmen aus Aluminium, bronze-eloxiert, geschäumte Handgriffe, 5-fach höhenverstellbar von 82 - 92 cm, rutschhemmende Gummifüße, per Knopfdruck faltbar, starr, Belastbarkeit 100 kg

1 Stück

46,90 /St.*
* +7 % MwSt.



MEG 961864

Gehgestell für Erwachsene

stabiler Rahmen aus Aluminium, bronze-eloxiert, geschäumte Handgriffe, 5-fach höhenverstellbar von 82 - 92 cm, rutschhemmende Gummifüße, per Knopfdruck faltbar, **bewegbar**, Belastbarkeit 130 kg

1 Stück

50,90 /St.*
* +7 % MwSt.



MEG 961863

Gehgestell für Heranwachsende

Aluminium bronziert, starr, faltbar, höhenverstellbar von 75 - 85 cm

1 Stück

51,80 /St.*
* +7 % MwSt.

Menge

EURO

ROLLATOREN

Rotomed / megro

Gehilfe für sicheres Fortbewegen, Sitzen und Einkaufen: stabile Stahlrahmenkonstruktion, kunststoffbeschichtet, faltbar; Einsteckrohre höhenverstellbar, anatomisch geformte Handgriffe, Faltsicherung, Doppelfunktion der Ergo-Bremse durch ziehen und drücken, pannen-sichere PU-Bereifung, inkl. Korb, Tablett und Stockhalter (montiert); Griffhöhe 78 - 95 cm, Sitzhöhe 62 cm, Sitzfläche 45,2 x 22 cm, Gesamtbreite 61,5 cm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht: 11,2 kg ohne Tablett und Einkaufskorb, 12,4 kg mit Tablett und Einkaufskorb

MEG 963350
MEG 963360

Gestell: **silber**
Gestell: **blau**

1 Stück
1 Stück

72,00 /St.
72,00 /St.



Integrierter Stockhalter in der Anwendung

MEG 963385

Leichtgewicht-Rollator

aus Aluminium, Gestell: **silber-metallic**, sehr leichter und trotzdem stabiler Rollator, Rückenrohr mit Polsterung, einfacher Faltmechanismus, Handgriffe höhenverstellbar, Doppelfunktionsbremse, PU-Bereifung, inkl. Korb und Stockhalter, Griffhöhe 79 - 90 cm, Sitzhöhe 56 cm, Sitzfläche 45 x 31 cm, Gesamtbreite 55,5 cm, Gewicht: mit Korb 7,5 kg, ohne Korb 7 kg, Belastbarkeit 120 kg

1 Stück

95,00 /St.



MEG 963390

Leichtgewicht-Rollator Brado (Bechle)

aus Aluminium, Gestell **anthrazit**, 7,2 kg bei hoher Stabilität, sichere Bremskonstruktion, Ergogriffe, Steighilfe für Anheben der Lenkräder, einstellbare Griffhöhe, einfach zusammenzufalten durch „Einhand-Klappmechanik“, leicht zu manövrieren – auch auf rauem Untergrund, inkl. Netztasche und Gehstockhalter, Sitzbreite: 41 cm, Sitztiefe: 19 cm, Sitzhöhe: 62,5 cm, Gesamtbreite: 60 cm, Gesamthöhe: 102 cm, Gesamtlänge: 66 cm, Maß gefaltet: 22 cm, max. Belastbarkeit: 150 kg

1 Stück

299,00 /St.



Menge

EURO

FALTROLLSTÜHLE UND ZUBEHÖR**Rotimed® / megro**

MEG 964345

Transportrollstuhl

1 Stück

175,00 /St.*

* +7 % MwSt.

rot, klein, leicht, faltbar und einfach im Auto zu verstauen, Rücken abklappbar für Transport, Seitenteile nach hinten abschwenkbar, Beinstützen nach außen schwenkbar (abnehmbar), Fußplatten höhenverstellbar und abklappbar (mit Fersenband), Feststellbremse, Bremse für Begleitperson, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 40 cm, Sitzhöhe: 50 cm, Rückenhöhe: 46 cm, Gesamtbreite: 58 cm, Gesamthöhe: 96 cm, Gesamthöhe bei abgeklapptem Rücken: 75,5 cm, Gesamtlänge: 102 cm, Gesamtlänge ohne Beinstützen: 77 cm, Maß gefaltet: 27,5 cm, Antriebsrad: 12" (PU), Lenkrad: 7" (PU), Gewicht: 13,6 kg, max. Belastbarkeit: 110 kg

**Rotimed® / megro****Standard-Faltrollstuhl**

Bezug: Nylon, schwarz, mit Polsterung, klappbare Fußstützen, abnehmbar, höhenverstellbar, mit abnehmbaren Seitenteilen, nicht rostenden Felgen mit Edelstahlspeichen, gepolsterter Rückenlehne, luftbereit, mit zusätzlicher Luftpumpe und Rückentasche, Sitzbreite: 43 - 45 cm, Gesamtbreite 65 cm, Belastbarkeit 100 kg



MEG 964350

Gestell: **chrom**

1 Stück

250,00 /St.*

MEG 964352

Gestell: **blau**

1 Stück

250,00 /St.*

* +7 % MwSt.



MEG 964340

Rotimed® / megro**Standard Faltrollstuhl**

1 Stück

267,00 /St.*

* +7 % MwSt.

Rahmenfarbe: silber-metallic, Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar und abnehmbar sowie höhenverstellbar. Fußplatte mit Fersenband, Kniehebelbremse, PU-Bereifung, passive Beleuchtung und Rückstrahler, Rückenrohr mit Lumbalknick, Sitzbreite 48 cm, Sitzhöhe 50 cm, Sitztiefe 42 cm, Rückenhöhe 40 cm, Gesamthöhe 92 cm, Gesamtlänge 102 cm, Belastbarkeit 140 kg

Menge

EURO

WECHSELDRUCKSYSTEME



MEG 990840

Aggregat

1 Stück

128,08 /St.

steuert den Druckwechsel in der Matratze, arbeitet geräuscharm, ist wartungsfrei sowie auf Körpergewicht stufenlos einstellbar,
Technische Daten:
Stromversorgung: 220 V/50 Hz,
Größe (LxBxH): ca. 26 x 11,5 x 9,5 cm

Anleitung:

- Matratze ins Bett legen und an Kopf- und Fußende zum Fixieren einschlagen. Keine Heizdecken benutzen.
- Hängen Sie die Pumpe am Fußende ein und schließen Sie die Schläuche an. Schläuche nicht pressen oder knicken.
- Netzkabel anschließen (220 V, 50 Hz). Die grüne und rote LED-Lampe leuchten auf.
- Drehen Sie den Druckregler auf "Maximum". In 20 Minuten erlischt die rote LED-Lampe und die Matratze ist vollständig aufgeblasen. Die grüne LED-Lampe bleibt während des Betriebes der Pumpe an.
- Regeln Sie nun den Druck entsprechend Ihres Gewichtes (siehe Tabelle).
- Bitte achten Sie darauf, daß aus Sicherheitsgründen die Seitengitter Ihres Bettes beim Betrieb mit Wechselluftmatratzen hochgestellt sind.



Einstellvorschläge

Stufe	Patientengewicht
1 - 2	bis 50 kg
2 - 3	50 - 70 kg
3 - 4	70 - 85 kg
4 - 5	85 - 100 kg
5 - 6	100 - 115 kg
6 - 7	115 - 130 kg
7 - 8	130 - 145 kg



MEG 990850

Matratze mit Belüftung

1 Stück

49,85 /St.

ohne Pumpe/Wechselluftdruckaggregat, empfohlen für Patienten mit mäßiger Dekubitus-Problematik – einfach auf die Bettauflage legen (zwischen Matratze und Bettlaken). Durch Druckwechsel im Mehrkammernsystem sorgt das Wechselluftdruckaggregat ständig für eine Auflagedruckveränderung und somit wirksame Dekubitus-Prophylaxe. Die Matratze ist leicht zu reinigen. Die Verlängerungen (je 50 cm) an beiden Enden der Matratzenauflage verhindern ein Verrutschen – einfach am Kopf- und Fußende unter die Matratze schieben.
Breite (aufgepumpt): ca. 90 cm
Länge (aufgepumpt): ca. 200 cm + Verlängerung
Höhe (aufgepumpt): ca. 6 cm
Anzahl der Luftkammern: 130
Belastbarkeit: 100 kg
Farbe: beige
Gewicht: 2,2 kg
Zubehör: 2 Schläuche, 1 Tube Sekundenkleber und 2 Kunststofflicken liegen der Matratze bei

